

A5

146 mm

簡單好用 遙控器直覺式操作。

兼具舒適按摩功能及時尚輕量小巧的主體，
上市以來熱賣的3D按摩椅墊系列。
保留穩定的按摩球動力及加熱揉捏功能等，並改良設計性及使用便利性，
讓您任何情況都好用。



搭載機能

3種模式可供選擇

每按下一次模式切換鍵，運作模式就會如下述切換，您所選的模式即會亮燈。

全身 ▶▶ 上部(肩) ▶▶ 下部(腰)

加熱器功能

按下加熱器後，右側亮燈，開啟加熱器功能，按摩球變成紅色。再按一次加熱器，即可關閉加熱器功能。

一看就懂的3個簡單按鍵



表 4

148 mm

DOCTORAIR 客服中心
0800-255-123

9:00~12:00 13:00~18:00 (六日 / 國定假日除外)



FB臉書粉絲團及經銷店舖等資訊

DOCTORAIR 搜尋

除直營門市，全國各大百貨及家電量販店皆可范臨體驗。
詳情請上官方網站查詢。

BODY CARE STORE

⚠使用注意事項
使用前請務必閱讀隨附於產品的說明書

◎以下使用者請勿使用

嬰幼兒及幼小孩童；無法自主表達意思者及無法操作者；醫師禁止按摩者（例如：心臟相關疾病、急症、發熱性、血壓異常、血栓（栓塞）、重度靜脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染、脊椎（頸椎）病症；飲酒或服藥者；曾有化學纖維過敏經驗者；健康狀況不佳者；嚴重疲勞者等）

◎使用於下列部位，請務必先找醫師諮詢，方可使用。

動過整形手術的部位；皮下埋有金屬、塑膠、矽膠等的部位；皮膚有狀況的部位（例如：異位性皮膚炎、顏面黑皮症、皮膚炎症、發癢發熱的部位、物理性刺激等誘發的病理性色素沈澱或暗斑、敏感性肌膚、蟹足腫體質等）；出現感覺、知覺障礙的部位；胸部；生殖器；頭部；骨折處；脊椎；關節

◎下列人士，務必找醫師諮詢，方可使用。

心律調節器等易受電磁干擾影響的體內植入型醫療電子儀器使用者；惡性腫瘤患者；心臟病患；腳部重度血液循環障礙者；溫度感覺喪失者；懷孕或可能懷孕者；剛生產完者；糖尿病等高度末梢循環障礙引發知覺障礙者；皮膚創傷者；需要安靜者；體力衰弱者；體溫38°C以上者（發燒期）（例如：急性發炎症狀=倦怠感、畏寒、血壓變動等）發作期及衰弱時；骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉拉傷等急性（疼痛性）患者；剛接受過治療或使用於疾患部者；關節炎、鞭抽式損傷、頸損傷、脊柱管狹窄症、椎間盤突出者；脊椎異常或脊椎側彎者；接受醫師治療中或上述以外身體感到異常者

其他禁止事項、應注意事項，請閱讀產品隨附的使用說明書。

■照片及圖例僅供參考。
■產品規格及設計，可能因性能、功能升級，未經預告運行變更。

製造商
株式會社Dream Factory商品管理中心
〒530-0001大阪府北區梅田1-12-17 梅田廣場大樓16F

代理商
群光電子股份有限公司
新北市三重區光復路二段69號

MS03-181122

表 1

148 mm

DOCTORAIR



3D MASSAGE SEAT LITE | 3D按摩椅墊 LITE

148 mm



室內空間完美結合

時尚有型的設計

造型洗練的3D按摩椅墊

148 mm




01. 全體型適用的長背板構造

約60公分長的長背板，從肩到背、腰、臀，完整涵蓋。容易感覺酸痛僵硬的部位，全都揉捏得到。再佐以按摩球上下移動鍵，可指定按摩球移動範圍，任何身材都能享受「恰到好處」的舒適按摩。



02. 椅面加厚舒適加倍

提高座椅面彈性，讓使用感受更加放鬆舒適。約7公分的座椅面，厚度十足，相當有彈性，坐起來完全無壓力。貼合身體，可以體驗更充實的按摩時光。

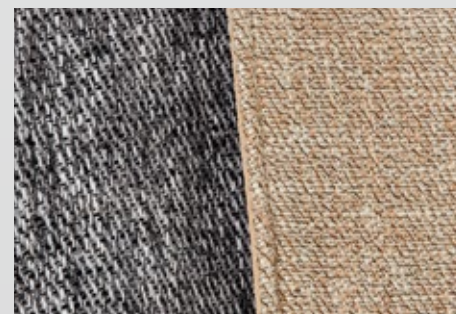

03. 完美結合室內擺設布織品質感

更加重視擺設性，使用洗練的優質粗花呢布料。粗花呢布料特有的柔和色彩及饒富深意的質感是其魅力。不過份搶鏡、能融入室內設計，任何空間都能輕鬆駕馭，也是特色之一。



04. 主體重量約4公斤，輕鬆移動不費力

不僅具備高度按摩性能，主體重量還只有4公斤。女性也能一人簡單搬運。不用侷限在一個地方，任何位置都能享受舒適的按摩樂趣。

146 mm

洗練的色彩變化。

完美結合室內擺設的設計及色彩變化。




灰 (MS-03GR)




米色 (MS-03BE)

附加熱功能的按摩球

開啟/關閉溫熱功能，按摩球會發出對應光線

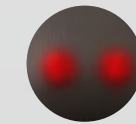

加熱功能
開啟

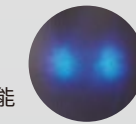

加熱功能
關閉

使用目的或效果

使用於一般家庭的按摩椅墊。

從疲勞中恢復、消除肌肉疲勞
舒緩肌肉酸痛僵硬、肌肉疼痛



產品規格

銷售名稱	3D 按摩椅墊LITE	存放環境溫溼度	0°C~+40°C 10~85%RH
型號	MS-03	外觀尺寸	寬420mm×高1112mm×深155mm
電源	AC110V 50Hz/60Hz	(不含按摩球)	
額定消耗電力	24W(負載時 單加熱器:4W)	重量	約4公斤(僅主體)
消耗電力	10.5W(無負載時)	附件	緩衝墊、AC變流器
揉捏次數	35次/分(±10%)		使用說明書(附保證書)
按摩球移動速度	約1.3公分/秒(±3%)	原料	ABS、聚酯纖維、聚氨酯
定時器	15分鐘(±10%)	製造國家	中國
使用環境溫溼度	+10°C~+40°C 30~85%RH		

※實際時間及次數，依使用狀況、使用環境而異。