

DOCTORAIR

自行送修

第1版

保固書

產品名稱 | 全方位紓壓按摩槍

型號 | REG-07TW

購買日期 | 年 月 日

保固期間 | 主機自購買日起**保固1年**（耗材及配件除外）

| 顧客資訊 |

姓名

地址

聯絡電話

電子信箱

經銷店名

經銷地址
電話號碼

本保證書約定依本保證書記載內容免費修理。

自購買日起，於上述期間內發生故障時，請提具本保證書，委託原購經銷店家修理。

以郵購等購買時，以送貨單上記載的到貨日為購買日期。

經銷商店名稱位未填寫時，請向原購店家申請，要求填寫。

顧客所填寫之保證書存根，其填寫內容，可能用於保固期內的服務活動及之後的安全檢查活動，敬請理解。

除法令規定外，未經事前同意，不得用於上述以外之目的。（請參閱免費保固規定頁）

故障・修理洽詢

0800-255-123

| DOCTORAIR 顧客諮詢窗口 |

09:00-12:00 13:00-18:00 (例假日 / 國定假日除外)

經銷據點資訊等

DOCTORAIR 搜尋

歡迎蒞臨直營店及家電量販店等體驗。
詳情請見官網首頁。



製造商 DREAM FACTORY股份有限公司 〒530-0001 大阪府大阪市北區梅田1-12-17 JRE 梅田廣場大樓16樓
代理商 群光電子股份有限公司 新北市三重區光復路二段69號

DOCTORAIR

| 使用說明書 |



EXAGUN HANDY PRO

全方位紓壓按摩槍 / REG-07

誠摯感謝您本次選購 DOCTORAIR 產品。

- 使用前請務必閱讀本使用說明書，安全正確的操作。
- 使用說明書刊載之插圖為示意圖。

前言

安全注意事項

為了預防危害使用者以及他人的人身安全與財產，請務必遵守以下所示之注意事項。

請務必充分理解以下內容（標示・記號圖示），並閱讀及遵守記載的注意事項。

關於警告・注意 針對錯誤的使用方法 區分並說明可能導致的危險與損害程度	
 警告	錯誤的使用方法將可能導致死亡或重傷。
 注意	錯誤的使用方法將可能導致受傷或房屋、財產損壞。

記號圖示範例 以下記號圖示代表必須遵守的事項。	
 禁止	不得進行。
 必須遵守	必須進行。

目次

前言	安全注意事項	3
	各部位名稱及配件	10
使用方法	充電	12
	產品使用方式	14
其他	保養及保存方法	18
	故障排除	19
	基本規格	21
	保固及售後服務	22

警告



禁止

- 請勿供無法表達本身意見或無法自行操作者使用。(否則可能導致受傷或意外事故)
- 經醫師禁止接受按摩者請勿使用。
(否則可能導致症狀惡化)
例：心臟疾患・急性疾病・發燒・血壓異常・血栓 (栓塞)・重度動脈瘤・急性靜脈瘤・各種皮膚炎或皮膚感染 (包含皮下組織發炎)・頸椎退化・飲酒或服藥中・曾對化學纖維出現過敏出疹反應者・健康狀態極度不佳者・極度疲勞者等等
- 請勿用於以下部位。
曾接受整形手術的部位・皮膚下埋有金屬・塑膠・矽膠等的部位・
皮膚狀況異常的部位/例：異位性皮膚炎・皮膚發炎・因物理性刺激而產生的黑斑或痣・敏感肌・蟹足腫體質等・出現痛覺或知覺障礙的部位・胸部・陰部・頭部・骨折部位・脊椎部位・關節部位
- 請勿過度使用於身體・部位。(否則可能導致意外事故或不適)
- 當按摩頸部周遭時請特別注意，請勿使用於頸部正面。
(否則可能導致意外事故或受傷)
- 請勿使用或保存於以下場所。(否則可能導致意外事故、受傷或產品故障)
 - ・ 嬰幼兒・年齡幼小的兒童或寵物可觸及的場所
 - ・ 暖桌中・暖氣附近・電熱毯上等高溫場所
 - ・ 陽光直射或車內等高溫場所
 - ・ 會遇水・高溫高濕・有大量灰塵的場所
 - ・ 容易受到震動或撞擊的場所
 - ・ 強力電磁波範圍內
- 使用時請勿配戴飾品等硬物・皮帶・圍巾。(否則可能導致意外事故或受傷)
- 請勿供嬰幼兒或年齡幼小的兒童使用本產品或當作玩具。(否則可能導致意外事故)
- 請勿將髮夾等尖銳物品或異物插入主機的充電接頭 (Type-C) 縫隙中。(否則可能導致火災・觸電或產品故

警告



禁止

- 本產品並無防水設計，請勿在浴室等場所使用。(否則可能因漏電而導致觸電或起火)
- 請勿使用配件隨附以外的按摩頭。另，配件為本產品的專用產品，請勿用於其他機器。

關於充電電池

- 本產品內附鋰電池，切勿進行以下行為。
 - ・ 加熱或置於火焰中
 - ・ 在高溫場所使用、充電或保存
 - ・ 在暖桌或棉被中使用或充電
 - ・ 覆蓋毛毯等物品使用或充電
 - ・ 在陽光直射或夏天的車內等高溫場所使用或充電
- 請勿使用性能劣化的鋰電池
若使用性能劣化的鋰電池，將可能導致嚴重的意外事故。若發現電池的性能劣化或出現任何異常狀況，請停止使用並諮詢 DOCTORAIR 客服中心。
* 例如運轉時間變短・無法充電等情形

警告



必須遵守

- 以下人士在使用前請務必先諮詢醫師。
 - 正在使用心律調節器等、容易受到電磁波影響的體內植入型電子醫療儀器者
 - 患有惡性腫瘤者
 - 患有心臟疾病者
 - 患有嚴重血液循環障礙者
 - 懷孕或有懷孕可能者、剛生產完的產婦
 - 因糖尿病等嚴重末梢循環功能障礙而患有知覺障礙者
 - 患有高血壓者、容易出現紫斑者
 - 需要靜養或體力衰退者
 - 體溫超過38°C以上(發燒)者
例:急性發炎症狀(疲倦、發冷、血壓出現變化等)嚴重或體力衰弱時
 - 患有骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉拉傷等急性(疼痛)症狀者
 - 患有肌腱炎、頸部揮鞭症候群、頸椎損傷、脊椎狹窄症、椎間盤突出、腰痛、坐骨神經痛等骨科疾病者
 - 脊椎骨骼異常者、正在接受醫師治療者
 - 出現上述以外的身體異常狀況者
- 初次使用、長時間未曾使用或年長者請勿長時間使用，至習慣為止都請以弱等級的震動短時間使用。
- 使用前請務必安裝配件的按摩頭。
- 當從寒冷場所移動至溫暖處等室溫急遽上升之後，產品內部可能會產生結露現象。若在結露時使用，可能會導致產品故障。當溫度出現大幅變化時，請先放置1小時之後再開啟電源。
- 若在使用時感到頭暈、想吐、疼痛、肌膚紅腫等身體異常狀況，請立即停止使用，如未改善則請諮詢醫師。(否則可能導致意外事故或身體不適)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用

警告



必須遵守

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器僅提供標示於電器之超低安全電壓
- 電器報廢前應取出電池
- 取出電池前電器應切斷電源
- 應安全地丟棄電池
- 發生異常・故障時請立即停止使用。如有使用AC轉接頭，請將AC轉接頭自插座上拔除。(否則可能導致冒煙、起火或觸電)
 - ＜異常・故障例＞
 - 當主機、轉接頭、電線
 - 變形、異常發燙
 - 發出異常噪音或異味・冒煙
 請立即諮詢 Doctor Air 客服中心。
- 關於電源
 - 請勿以潮濕的雙手將AC轉接頭自插座上拔除(否則可能導致觸電)
 - 請勿使電源插頭・USB連接線破損。(否則可能因觸電或短路而導致起火・火災)
請勿損壞、改造、拉扯、過度彎曲、扭轉、將重物壓在其上、纏繞在主機上或捆成一束使用
 - 請勿使用受損的AC轉接頭或鬆脫的插座。
- 切勿拆解・改造。(否則可能導致觸電或受傷)
- 切勿更換內附的充電電池，否則可能產生危險。



禁止拆解

注意



禁止

- 請勿用於其他目的。(否則可能導致受傷或身體不適)
- 請勿與其他器材或機器同時使用。(否則可能導致意外事故、受傷或身體不適)
- 請勿摔落本產品或以重物重壓，並請勿使本產品受到強烈撞擊。(否則可能導致火災、觸電或產品故障)
- 使用時請勿使本產品負荷重量。
- 飲酒時或飲酒後請勿使用。(否則可能導致意外事故或受傷)
- 飲酒期間或飲酒後請勿使用。(否則可能導致意外事故或受傷)
- 使用時請勿進行其他作業。(否則可能導致意外事故或受傷)
- 請勿用於醫療用途。

注意




必須遵守

- 每次的使用時間請勿超過10分鐘。(否則可能導致反效果、受傷)
 - 本產品會震動，使用時請確實緊握握桿或機臂以防掉落。
 - 按摩頭運轉時，可能會與肌膚產生摩擦。若摩擦過強，可墊著毛巾等物品使用。
 - 用餐後請間隔足夠的時間再使用。(否則可能導致身體不適)
- 關於電源**
- 請遵插座與配線、器材的額定電壓。(若超過額定電壓，可能因觸電或發燙而導致火災)
 - 請定期清潔主機以及電源插頭以防沾附灰塵。(否則可能因濕氣或灰塵造成絕緣體劣化並導致火災)
 - 充電完成後，請將AC轉接頭自插座上拔除。
 - 當開始打雷時，請立即停止充電。(否則可能導致故障)
 - 開關機臂時，請小心避免手指遭夾。
 - 直接使用於肌膚時，請勿使用化妝品或精華油、乳霜等保養品，請務必使用於乾淨的肌膚上。(否則可能導致按摩頭損壞)
 - 使用時，請小心避免手指夾入或頭髮捲入主機與按摩頭之間的縫隙。

各部位名稱及配件

主機

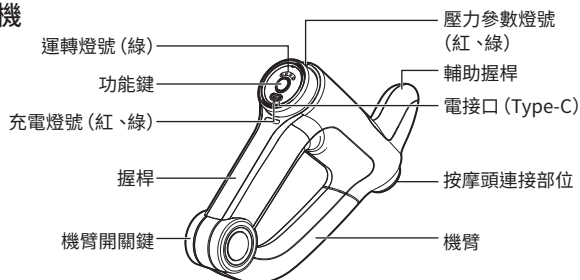

功能鍵

- 長按 (1.5秒) 可切換電源 ON/OFF。
- 短按會以下列順序切換震動等級。
依序重複切換等級1-2-3-4-1

運轉燈號 (綠)

燈號數量代表選擇的震動等級。

- 亮 1 個燈：震動等級 1
- 亮 2 個燈：震動等級 2
- 亮 3 個燈：震動等級 3
- 亮 4 個燈：震動等級 4

按摩頭連接部位

安裝按摩頭。

充電接口 (Type-C)

連接配件的USB連接線。

機臂開關鍵

按下可展開機臂。

充電燈號 (紅、綠)

顯示充電狀態與剩餘電量。

充電時，會以下列順序亮燈。

紅燈熄滅 → 紅燈亮燈 → 綠燈熄滅
→ 綠燈亮燈 (充滿電量)

運轉時，會以下列順序亮燈，代表減少的剩餘電量。


綠燈亮燈 → 紅燈亮燈 → 紅燈熄滅
※當充滿電量之後，綠燈會在亮燈3分鐘之後熄滅。拔除USB連接線之後，綠燈會亮燈3秒。

壓力參數燈號 (紅、綠)

燈號顏色會根據按壓身體的強度而變化。

配件

按摩頭

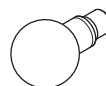

球型按摩頭 (矽膠)

用於肩膀、腰、大腿等大肌肉部位。

※亦可在選擇震動等級4 (臉部模式) 時使用。




圓錐型按摩頭

用於腳底等部位。



U字型按摩頭

用於手腕、小腿後側等部位。

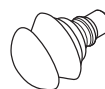

緩衝型按摩頭 (矽膠)

用於小腿後側、大腿時，可減少刺激並用於肌肉較少的部位。

※亦可在選擇震動等級4 (臉部模式) 時使用。



USB連接線 (Type-C)



收納包



使用說明書
(附保證書)


使用方式

充電

初次使用或長時間未使用之後，請先依照下列程序進行充電。
另，請視需求定期充電。

注意

- 充電中不會運轉（震動）。若在運轉中充電，將會自動關閉電源並開始充電。
- 使用前請確認主機與按摩頭有無破損。若發現異常狀態則請勿充電，並請諮詢DOCTORAIR客服中心。
- 當無法確實充電或充電後的運轉時間變短时，代表電池的壽命已盡。屆時，本公司將提供付費的內附電池更換服務。請切勿自行更換，並請諮詢DOCTORAIR客服中心。
- 初次使用或長時間未使用之後，充電完成後的運轉時間可能較短。

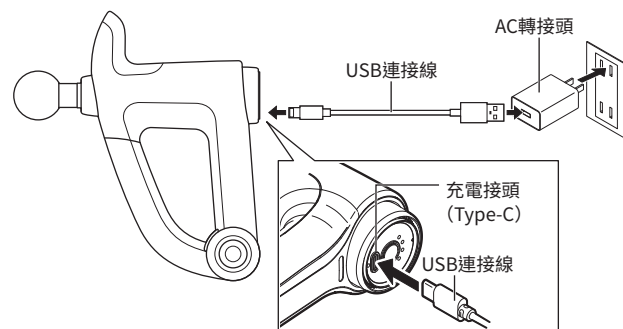

1 將USB連接線連接主機的充電接頭。

請確實插至最底部。

2 將USB連接線連接AC轉接頭，並將AC轉接頭插入插座。

自電池無剩餘電量的狀態至充滿電量約需2小時。

※使用適用USB的市售AC轉接頭時，建議使用額定電壓DC5A2A以上的AC轉接頭。

※亦可使用市售的USB連接線。使用市售產品時，請務必使用「56k Ω 電阻」的USB Type-A to C連接線。


3 充電完成之後，請將AC轉接頭自主機與插座上拔下。

使用EXAGUN Handy Pro

本產品提供4階段的震動等級、以及4種類的按摩頭。請選擇適合自己的等級與按摩頭。

使用之前

- 在使用之前、或隔一段時間未使用時，請先確認功能鍵等狀態是否正常。
- 初次使用前必須先充電。詳細內容請參考「充電」(P.12 ~ 13)。
- 本產品會震動，使用時請確實緊握握桿或機臂以防掉落。
- 使用前請務必安裝配件的按摩頭。
- 根據使用的狀況，主機與按摩頭的連接部位可能會發熱。另，無論是否正在使用中，都請勿碰觸按摩頭的連接部位。
- 使用時，請小心避免手指夾入或頭髮捲入主機與按摩頭之間的縫隙。

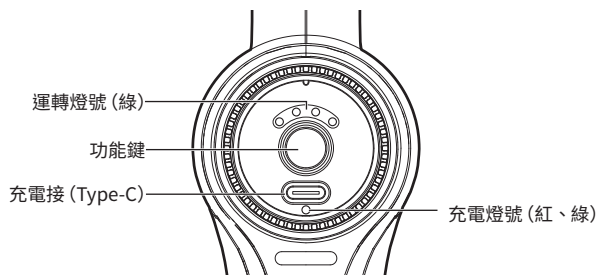

1 將偏好的按摩頭安裝至按摩頭的連接部位。


將按摩頭筆直裝入按摩頭連接部位的最底部。

訣竅

取下按摩頭時，可一邊輕輕旋轉一邊拔出。

2 (視需求) 打開機臂。

按住機臂開關鍵，展開機臂直到聽見“喀嚓”聲。另，關閉機臂時，請同樣按住機臂開關鍵，關閉機臂直到聽見“喀嚓”聲。

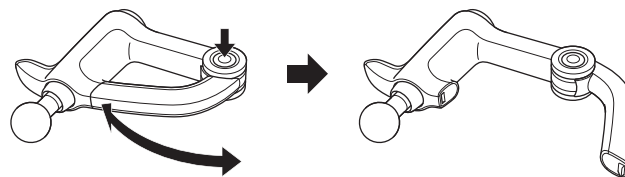

注意

- 開關機臂時，請小心避免手指遭夾。
- 收回機臂時會出現空隙。

3 長按功能鍵約1.5秒。

開啟電源，以震動等級1開始震動。
充電燈號的顏色代表電池的剩餘電量。

4 按功能鍵調整震動等級。


每次按下功能鍵，將依照
震動等級1 (弱) → 2 (中) → 3 (強) → 4 (臉部模式) → 1...的順序重複切換。
另，燈號數量會根據震動等級而改變。

5 將本產品對準身體部位使用。


確實握緊機臂或握桿、輔助握桿，將本產品對準輕壓大腿、小腿後側、肩膀、手腕等部位，一邊緩慢按摩一邊使用。

※請與身體部位垂直對準使用。若傾斜使用將可能導致故障。

使用方式例：

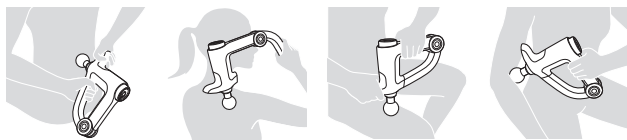

用於臉部時

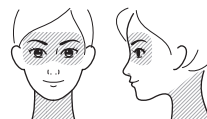

矽塑膠的部位。

· 使用時間以全臉3分鐘以內為標準。

- 用於臉部時，請務必安裝球型與緩衝型按摩頭，並選擇震動等級4 (臉部模式)。
- 請勿用於額頭等骨頭部位、眼球、眼周、耳朵、喉嚨等臉部正面、曾骨折或接受外科手術的部、皮膚下埋有金屬、矽膠、

注意

- 直接使用於乾淨的肌膚時，請勿使用化妝品或精華油、乳霜等保養品。

壓力參數

按壓身體時，會啟動壓力參數功能。

壓力參數燈號會根據按壓身體的強度而變化。

綠燈：輕微壓力

紅燈：強大壓力

※當按摩頭強力按壓身體等、震動部位受到強大負荷時，將會因安全考量而停止震動。短按功能鍵即可再度開始震動。在震動停止的狀態下，若1分鐘皆無任何操作，則會自動關閉電源。

6 開啟電源約10分鐘之後，會自動停止震動並關閉電源。在運轉時切換震動等級亦不會重新計時。

7 如欲在運轉中關閉電源，請長按 (1.5秒以上) 功能鍵。

保養及保存方法

保養方法

注意

- 在開始保養之前，請務必關閉電源。
- 請勿使用稀釋劑・石油類・酒精等溶劑或藥劑、熱水。否則可能導致故障或零件破裂、變色等。

使用結束之後，請以軟布擦拭主機與按摩球以防汗水殘留。

若髒污狀況嚴重，請將海綿或軟布以水沾濕後擰乾擦拭。其後請以乾布拭乾。

保存方法

- 保存時請務必關閉電源。
- 請確實清除髒汙與灰塵，並避免保存於浴室等潮濕有水的場所、或陽光直射的場所。
- 請勿保存於嬰幼兒、年齡幼小的兒童或寵物可觸及的場所。
- 預計將長時間存放時，請放入配件的收納包中以防沾染髒汙或灰塵。
- 若USB連接線遭到扭轉，請先整理平整再保存。

丟棄時

本產品內附鋰電池。欲丟棄本產品時，請依照居住當地自治單位的規定丟棄。詳細內容請洽詢各地區的自治單位。按摩頭以及收納包等其他配件，亦請依照居住當地自治單位的垃圾分類規定丟棄。

故障排除

問題	確認事項
連接電源卻沒有反應	· 充電中即使按下功能鍵也不會運轉。請先停止充電再使用。 · 可能並未確實充電。請再次充電。
震動微弱	可能並未確實充電。請再次充電。
無法充電、充電後的運轉時間變短	· 當周圍溫度極低或極高時，可能會無法正常運轉。請在溫度10°C~35°C的環境下充電。 · 初次使用或長時間未使用之後，充電完成後的運轉時間可能較短。重複充電及使用數次之後即會恢復正常。 · 以市售AC轉接頭充電時，請確認是否使用建議規格的AC轉接頭。 建議規格的轉接頭：額定電壓DC5A2A以上 · 使用非配件隨附的USB連接線時，可能會因為供電性能不良而無法充電、或需要更長時間才能充滿電量。請嘗試使用其他USB連接線。

問題	確認事項
突然停止運作	· 本產品會在開啟電源約10分鐘後自動停止震動並關閉電源。 · 可能是因為電池電量不足。請再次充電。 · 當按摩頭強力按壓身體時，會因安全考量而停止運轉。用於身體部位時，請勿過於強力按壓。
發出異常噪音	本產品的結構會發出一定程度的運作聲響。此現象並非異常。

若無法透過上述方法解決問題，請諮詢DOCTORAIR客服中心。

基本規格

主機

產品名稱	EXAGUN Handy Pro
型號	REG-07TW
電源	內含鋰電池
充電時間	約2小時(至充滿電為止)
可充電次數	約300回
主機額定功率	DC7.4V 6W (運轉時)
震動次數 [*]	等級 1：約1,500次/分鐘 等級 2：約2,000次/分鐘 等級 3：約3,000次/分鐘 等級 4：約800次/分鐘
計時器	約10分鐘
使用環境溫度	10°C～40°C
尺寸	約φ51.5mm × H199mm (H277mm：機臂伸展至最長時) × D134mm (未加裝按摩頭時)
重量	約350g (主機)
材質	ABS、SBR (合成橡膠)、矽膠
配件	按摩頭×4種 (球型、圓錐型、U字型、緩衝型)、USB線 (Type-C)、收納包、使用說明書 (附保證書)
製造國	中國

^{*} 實際的時間與次數依照使用狀況・使用環境而定。
以上標準是基於本公司建議的使用方式。

保固及售後服務

如欲諮詢使用・保養・維修的方法，請洽詢原購買經銷商。

保證書

購買時請確認已確實記載「購買日期」、「銷售店名」欄位。另，請仔細閱讀內容並妥善保存。

委託維修

請確認「故障排除」(P.19) 的內容。

若無法解決或反覆出現相同的問題，則請關閉電源，向原購買經銷商諮詢並提供以下資訊。

- ・ 購買日期
- ・ 產品型號：REG-07TW
- ・ 故障狀況（請盡量具體描述）

維修諮詢



在保固期內委託維修

將依照保證書的規定進行維修。另，即使仍在保固期限內，亦有可能會產生額外費用，請仔細閱讀保證書。

保固期：記載於保證書中。

超過保固期之後

若在檢測之後判斷能夠修復，將因應顧客委託進行付費維修。

維修費用將分成以下項目。

- ・ 技術費：檢測、維修、調整、檢查等費用
- ・ 零件費：用於維修的零件及輔助材料費用
- ・ 維修產品的運費：維修產品的來回運費

維修用功能性零件的保留期限

針對用於維持本產品性能的必要零件，在停止製造之後的保留期限參考標準為5年。零件保留期限為參考標準，實際期限可能有所不同。保留期限結束之後將停止受理維修保養。

如有其他不明事項

若針對售後服務尚有任何不明之處，請洽原購買經銷商或DOCTORAIR 客服中心。

請進行安心檢查

請對使用多年的EXAGUN Handy Pro進行檢查					
 安心檢查	<table><thead><tr><th>是否有這些狀況？</th><th>停止使用</th></tr></thead><tbody><tr><td> ● 冒煙、發出異味或聲響 ● USB 連接線鬆動或接觸不良 ● 內部有異物或進水 ● 主機變形或破損 ● 其他異常狀況 </td><td>為了預防故障或意外事故，請務必向原購買經銷商或 DOCTORAIR 客服中心委託檢查或維修。</td></tr></tbody></table>	是否有這些狀況？	停止使用	● 冒煙、發出異味或聲響 ● USB 連接線鬆動或接觸不良 ● 內部有異物或進水 ● 主機變形或破損 ● 其他異常狀況	為了預防故障或意外事故，請務必向原購買經銷商或 DOCTORAIR 客服中心委託檢查或維修。
是否有這些狀況？	停止使用				
● 冒煙、發出異味或聲響 ● USB 連接線鬆動或接觸不良 ● 內部有異物或進水 ● 主機變形或破損 ● 其他異常狀況	為了預防故障或意外事故，請務必向原購買經銷商或 DOCTORAIR 客服中心委託檢查或維修。				

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：全方位舒壓按摩槍 Equipment name		型號（型式）：REG-07 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt %”及“超出0.01wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

免費保固規定

1. 在依照使用說明書、主機標籤等注意事項使用的狀態下，若在保固期內發生故障，將提供免費的維修服務。但針對離島或相當於離島的偏遠地區，則需由顧客負擔維修所需的交通費、住宿費、運費（來回）等。
※如欲在保固期內委託免費維修，請向經銷商提供，出示本產品以及本保證書並進行申請。
※如因搬家或產品為贈品等原因，而無法向本保證書中記載的經銷商申請免費維修，則請諮詢 Doctor Air 客服中心。
2. 即使尚在保固期內，以下狀況原則上仍需另外付費。
 - (1) 未依照使用說明書中的方法使用而導致故障或損壞
 - (2) 因不當修理或改造而導致故障或損壞
 - (3) 因購買後的運送、掉落等原因而導致故障或損壞
 - (4) 用於一般家用以外（例如商業等）用途而導致故障或損壞
 - (5) 未出示保證書
 - (6) 保證書中未記載購買年月日、顧客姓名、住址、銷售店名，或文字遭到塗改
 - (7) 因配備於車輛、船舶上而導致故障或損壞
 - (8) 因火災、地震、淹水、雷擊、其他天災、電壓異常、使用非指定的電源（電壓、頻率）等而導致故障或損壞
 - (9) 經本公司（或本公司關係企業）以外業者進行不當維修、改造而導致故障或損壞
 - (10) 耗材、主機以外的配件耗損
 - (11) 因磨損或劣化而更換非永久性配件
3. 本保證書僅限於日本國內有效。
4. 本保證書無法再次發行，敬請妥善保管。當進行付費維修時，將由顧客負擔維修產品的運費、維修產品的零件費、技術費、出差費。

維修備註

- 本保證書根據書中所註明的期限與條件，約定提供免費維修的服務。本保證書並非用於限制顧客的法律權利。若針對超過保固期限之後的維修事宜有不明之處，請諮詢原購買經銷商或 DOCTORAIR 客服中心。