

顧客送修

保固書

產品名	3D深層紓壓美腿機		
型號	MF-07TW		
購買日期	年	月	日
保固期間	主機自購買日起保固1年(消耗品及配件除外)		

顧客資料

姓名	
住址	
電話	
電子信箱	
經銷店名	
電話 住址	

本保固書約定依本保固書記載內容免費修理。

自購買日起,於上述期限內發生故障時,請提具本保固書,委託原購經銷店家修理。

以郵購等購買時,以送貨單上記載之到貨日為購買日期。

經銷商店名欄位未填寫時,請向原購店家申請,要求填寫。

顧客所填寫之保固書存根,其填寫內容,可能用於保固期內之服務活動及之後的安全檢查活動,敬請理解。另,除法令規定外,未經事先同意,不得用於上述目的之外。(請參閱免費保固規定頁。)

故障、修理洽詢

DOCTORAIR 顧客諮詢窗口

0800-255-123

09:00-12:00 13:00-18:00

(例假日、國定假日除外)

經銷店家資訊等

DOCTORAIR 搜尋

歡迎蒞臨直營店及全國知名百貨或家電量販店等體驗。詳情請見官網首頁。



DOCTORAIR

製造商

DREAM FACTORY股份有限公司

〒530-0001 大阪府大阪市北區梅田1-12-17

JRE 梅田廣場大樓16樓

代理商

群光電子股份有限公司

新北市三重區光復路二段69號

DOCTORAIR

| 使用說明書 |



3D FOOT MASSAGER RELAX

3D深層紓壓美腿機 MF-07TW

誠摯感謝您本次選購DOCTORAIR產品。

●使用前請務必閱讀本使用說明書,安全正確的操作。

●使用說明書刊載之插圖為示意圖。

感謝您購買本產品。使用前，請仔細閱讀本使用手冊，並特別注意安全事項，以確保正確操作及使用。

請妥善保管本使用手冊，以便日後查詢。

目 錄

安全注意事項	1
機件名稱與功能	3
產品結構	3
控制台	4
控制台按鍵功能分解	5
使用方法	6
使用前準備	6
使用方法	6
使用後	6
保養方法	7
清潔	7
保養	7
溫馨提示	7
產品零部件回收說明	8
常見問題及處理方式	9
產品規格	10
免費保固規定	11

安全注意事項

安全注意事項

- ▶ 使用前，請仔細閱讀本“安全注意事項”，並正確使用。
- ▶ 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- ▶ 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

	警告	表示錯誤使用，使用者可能會蒙受重傷。
	注意	表示錯誤使用，使用者可能蒙受傷害或者物質損害。
		符號，表示禁止的行為。 圖中所示為具體指示的內容(例: 左圖為禁止拆卸)
		符號，表示強制、指令的內容。 圖中所示為具體指示的內容(例: 左圖為拔掉電源插頭)

警告

	強制	以下人員，請務必諮詢醫生後使用： 1. 使用心律調整器等植入體內的電子儀器者。 2. 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。 3. 惡性腫瘤患者、心臟病患者、高血壓患者、患有急性疾病者。 4. 皮膚有創傷者。 5. 孕婦或正處於經期者。 6. 骨質疏鬆症、脊椎骨折患者。 7. 體溫38度以上(發燒期)的人。
	禁止	本電器不預期供生理、感知、心智慧力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 本產品僅限一人使用，請勿兩人或兩人以上同時使用。 如果電源線損壞，應停止使用。 請勿損傷、損壞、過分彎曲、牽拉、扭轉、打結控制器電源線。 請勿讓未成年人使用本產品。
	禁止拆卸	除了本公司指定的修理技術人員之外，絕對不得對產品進行分解、修理和改裝，如有問題請即時與經銷商聯繫。


安全注意事項

注意

 強制	每次使用時間15分鐘為宜。
	請勿在產品上放置重物。
	請將產品放置在平坦的地面上。
	使用時，請勿在其上覆蓋毛毯或枕頭，以免因過熱而導致使用者灼傷，甚至引起火災。
	請勿用濕手操作控制台。
	請勿將產品放置於戶外。
	清潔產品時，絕對不可以將整個產品放到水中或其他溶液中。
	請使用產品配套的電源適配器，如需更換請聯繫專業人員更換。
	若是將本產品由低溫處移至較暖處使用時，往往會發生內零部件因為水氣的聚集而影響到本產品正常運作，甚至造成機件故障。建議取出後，在正常室溫下放置一小時後再使用。
	產品加熱，對熱不敏感的人使用時必須注意。(需正常人監護)
	請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
	請勿用於治療目的。
	如果停電請關閉開關，切斷電源，以避免來電時產品危險。
	使用中若感覺產品機件故障或不正常狀況，請立即停止使用。
請勿使用額定電壓以外的電源。	
 禁止	電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯繫經銷商或有資格的專業人員來更換修理。
	切勿在潮濕的環境下使用，以免產品受潮造成漏電傷人事故。
	在使用過程中，身體出現或感到異常時，請立即停止使用，並諮詢醫生。
	使用後請將電源插頭從電源插座上拔下。
	請勿飯後立即使用，以免造成不適。
	請勿在產品工作時，在產品上入睡。
	請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
	請勿在雷擊時使用。
	請勿用汽油、香蕉水等進行擦拭，請勿噴灑殺蟲劑。
	請勿將本產品置放於易燃物附近，以免產品布套因高溫而損壞。
使用產品時，請勿吸煙，以免造成火災。	

機件名稱與功能

產品結構

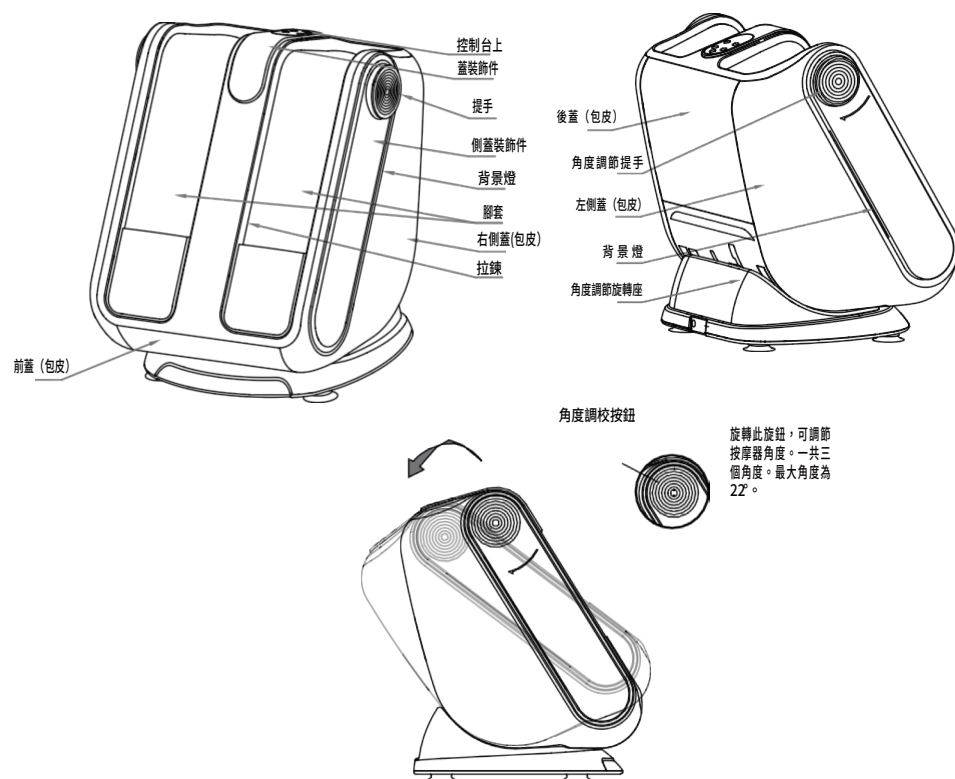

⚠ 注意

- ▶ 請勿站立在產品上使用或在產品上放置重物，以免產品發生故障。
- ▶ 在任何情況下，請勿站立或坐在產品上。
- ▶ 移動產品時，請勿直接拉扯電源線或拖拉本產品，以免造成損傷。
- ▶ 使用後，請將本產品存放好，請勿讓兒童接觸，以免受傷。

機件名稱與功能

控制台



⚠ 注意

- ▶ 請勿將水或其它液體濺到控制台上。
- ▶ 請勿過分用力按住按鍵不放，以免程式出錯。
- ▶ 請勿頻繁快速操作手控器，以免影響手控器引起其他異常故障。
- ▶ 手控器在每次按鍵操作之後 15 分鐘後自動關閉。

機件名稱與功能

控制台按鍵功能分解（每個按鍵皆配有指示燈）



電源開關鍵：

在通電狀態下，按一下開關鍵，此時機器進入工作狀態，背景燈長亮，通電默認41碼，按尺碼鍵，迴圈調節尺碼。
工作時間默認15分鐘開啟，強度默認中檔開啟，加熱預設開啟低檔，按摩模式預設P1模式開啟，當定時到了預定時間或按開機按鍵，所有功能停止，所有工作指示燈熄滅；（所有指示燈均為紅色）。



模式鍵：按下此鍵，依次可迴圈選擇3種模式，P1模式-末梢加強，P2模式-均衡舒緩，P3模式-循環放鬆，相應的指示燈亮起。（開機預設P1模式-末梢加強）。



氣壓強度鍵：

氣囊強度在開機狀態下，預設為中檔；切換強度時，按下該鍵，強度切換至高檔；再按一次強度鍵，切換至弱檔。依次迴圈選擇。（開機默認中檔強度，指示燈為紅色；3個指示燈對應相應的3種強度）。



溫度加熱鍵：

在開機狀態下，預設足部和腿部低檔加熱開啟，有高低兩檔迴圈。



腳掌尺寸鍵：

按一下此鍵進行尺碼調節，數碼管顯示對應尺碼35-45碼。
每按一下，尺碼加一碼，到最大碼時自動調回35碼，依此迴圈。



注意

- ▶ 使用過程中，若發生電源故障，請關閉電源開關並拔掉電源插頭。
- ▶ 請勿將手或手指靠近及插入縫隙，以免受傷。
- ▶ 請勿讓兒童及寵物在此玩耍，以免發生意外。
- ▶ 請勿將產品空載使用，以免磨損布套。

使用方法



使用前準備

- ▶ 請將產品水準放置。
- ▶ 與電視、收音機等視聽設備保持1米以上距離，以防止信號干擾。

使用方法

▶ 足底按摩：

選擇高度適合的椅子坐下，將您的雙腳放入產品中。（如圖一）先開啟機身上的“電源”鍵，開始進入工作。

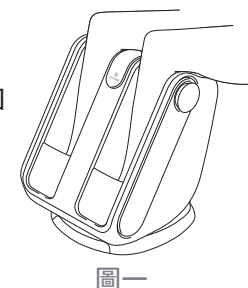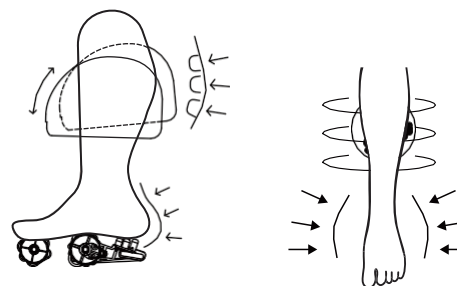


圖一

使用後


- ▶ 關閉控制台上的電源開關。

▶ 使用電源說明：

- ① 電源適配器上的輸出插頭與產品上電源線插孔相連接（請用機子自帶的適配器）；
- ② 將電源插頭插入交流100-240V~的電源插座上；

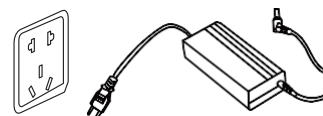

電源適配器

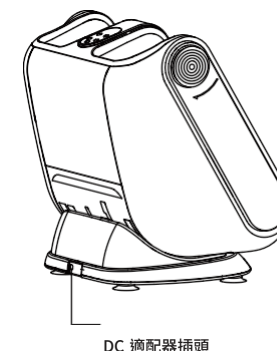

DC 適配器插頭



注意

- ▶ 插入插座前，請確認外露電線無破損。
- ▶ 請勿用濕手拔插電源插頭。

保養方法

清潔

- ▶ 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源插頭已經從插座上拔出。
- ▶ 產品的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。
- ▶ 髒汙的地方請用柔軟的布沾水或中性溶劑進行清潔後，再用幹布擦乾。



注意

- ▶ 切勿濕手拔插電源插頭。
- ▶ 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- ▶ 切勿使用甲苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。

保養

- ▶ 確認電源開關關閉，電源插頭已經從插座上拔出。
- ▶ 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- ▶ 如果長時間不使用產品，請放入包裝盒，防止落入灰塵。



注意

- ▶ 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色。

溫馨提示

常年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：

- ▶ 有焦糊氣味。
- ▶ 觸動導線後有時通電，有時斷電。
- ▶ 電源線發熱。
- ▶ 其它異常。
- ▶ 拆洗腳套時，請勿用力拉扯拉鍊，以免造成損壞。請用中性洗滌劑清洗布套。



警告

- ▶ 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- ▶ 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與您購買本產品的經銷商或本公司聯繫。
- ▶ 切勿私自拆卸修理。

產品零部件回收說明

回收提示性說明

為了保護環境，本產品或其中的部件報廢後，作為消費者的您有責任將其與生活垃圾分開，送至有資質的回收網站，由回收網站按照國家相關規定進行分類拆解、回收再利用等處理。

常見問題及處理方式

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現“咻咻”“噠噠”的聲音	產品正常工作時發出聲音或內部機件與布套之間的摩擦的聲音	無需任何處理
2	產品不工作	電源插頭脫落	插上電源插頭
		電源開關未開	打開電源開關
		產品過熱保護	間隔30分鐘後再次使用
3	使用過程中停止	默認工作時間到	間隔10分鐘後再次使用

如果進行了上述處理還有異常現象，請與當地經銷商聯絡，要求維修保養。

產品規格

產品名稱：3D深層紓壓美腿機

產品型號：MF-07TW

產品額定電壓：24V 

額定功率：60W

額定時間：15分鐘

產品尺寸：465*470*569(mm)

產地：中國

限用物質含有情況標示聲明表

設備名稱：3D深層紓壓美腿機 Equipment name				型號（型式）： MF-07TW Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
五金元件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

免費保固規定

1. 遵照使用說明書、主機貼附標籤等注意事項的使用狀態下，於保固期內故障時，免費修理。
惟，離島或等同離島之偏遠地區需修理時，交通費、住宿費、運費（來回）等，由顧客負擔。
※保固期內委託免費修理時，請攜帶、提具本產品及本保證書向經銷店家申請。
※因搬家或為贈送品等因素，無法由本保證書記載之經銷店家受理免費修理時，請洽DOCTORAIR顧客諮詢窗口。
2. 保固期內，若有下述情況，原則上仍需付費。
 - （1）使用說明書記載以外之使用上錯誤引起之故障及損傷
 - （2）不當修理或改造造成之故障及損傷
 - （3）購買後因運送、摔落等造成之故障及損傷
 - （4）用於一般家用以外（例如業務用等）的故障及損傷
 - （5）未提具本保證書
 - （6）保證書上未填寫購買年月日、顧客姓名、住址、經銷店名，或文字塗改
 - （7）搭載於車輛、船舶等處產生之故障及損傷
 - （8）火災、地震、水災、落雷、其他天災地變、異常電壓、使用指定以外電源（電壓、頻率）等造成之故障、損傷
 - （9）由敝公司（及敝公司關係企業）以外者，錯誤修理、改造，衍生之故障及損傷
 - （10）消耗品、主機以外配件之消耗
 - （11）磨耗或老化等壽命有限零件之更換
3. 本保證書限臺灣有效（This warranty is valid only in Taiwan.）。
4. 本保證書不予補發，敬請妥善保管。付費修理時，修理品之運費、修理零件費用、技術費用、出差費，由顧客負擔。

修理註記

- 本保證書約定依照本保證書註明之期間、條件免費修理。本保證書並未據此限制顧客法律上權力。
保固期過後之修理，若有不清楚之處，請洽經銷店家或DOCTORAIR顧客諮詢窗口。